

# NÓŻ PLAZMATYCZNY AURUM

SKUTECZNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO



AURUM DG



MIKROCHIRURGIA BEZ SKALPELA

# NÓŻ PLAZMATYCZNY AURUM

JEDNOZABIEGOWA MIKROCHIRURGIA BEZ SKALPELA

Innowacyjne urządzenie wykorzystujące czwarty stan skupienia - PLAZMĘ ARGONOWĄ do **mikrochirurgii estetycznej bez skalpela** w celu usuwania łagodnych zmian skórnych z, a także do zabiegów odmładzania, liftingu oraz blefaroplastyki (redukcji nadmiaru skóry okolic oka). Pozwala w sposób bezinwazyjny i całkowicie bezpieczny pozbyć się: włókniaków, brodawek, naczynek, prosaków czy innych zmian skórnych takich jak: zmarszczki czy nadmiar wiotkiej skóry.

## NÓŻ PLAZMATYCZNY AURUM

Regulowany podział strumienia plazmy

Wymienne ergonomiczne głowice

Indywidualna regulacja mocy

Ciągły stabilny strumień plazmy

Mobilne Bezpieczne

## PLAZMOWA SUBLIMACJA

Metoda polega na wytwarzaniu przez urządzenie **plazmy z argonu** - niereaktywnego biologicznie gazu szlachetnego, który naturalnie występuje w powietrzu. W kontakcie z argonem NÓŻ PLAZMATYCZNY wytwarza **kilkumilimetrowy tąg wyładowania**, a tym samym dostateczną stabilną energię i temperaturę by wywołać zjawisko **ewaporacji**, czyli odparowania zmiany w sposób „**bezkontaktowy**” ze skórą. Wytworzona plazma jest efektem jonizacji argonu tworząc strumień jego silnie zjonizowanych cząsteczek, posiadających wysoką energię kinetyczną, temperaturę oraz luminescencję, co dodatkowo oświetla obszar zabiegowy.

Zabieg jest **bezkrwawy i bezbolesny**, a w odróżnieniu od standardowych metod nie wywołuje zakażeń wtórnych czy bólu. Po zabiegu jedynie występuje lekkie zaczerwienienie i delikatny rumień, które ustępują w kilka minut do kilku godzin po zabiegu.



## CZAS ZABIEGU

Wystarczą 1-4 zabiegi do uzyskania pełnego efektu redukcji aż 66% nadmiaru skóry

Czas zabiegu 10-30 minut



3-4 dni okresu rekonwalescencji

## EFEKTY

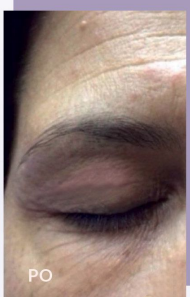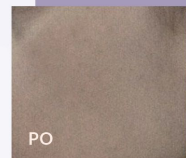


# EFEKTY DZIAŁANIA PLAZMY

NATYCHMIASTOWE REZULTATY

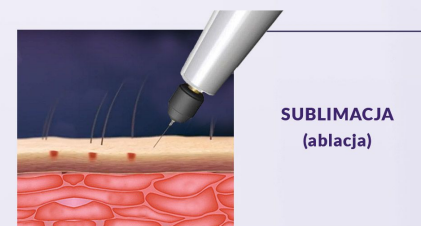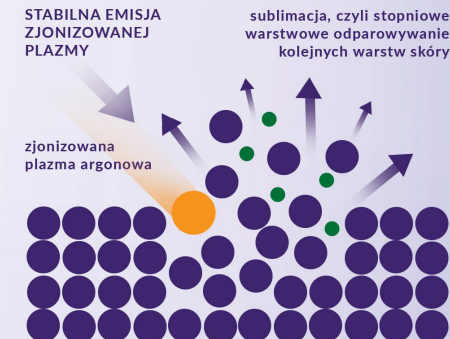

- Punktowe mikrosablacje na różnych poziomach skóry
- Blefaroplastyka - plastyka powiek bez skalpela
- Redukcja wszystkich rodzajów zmarszczek
- Zwiększenie rozstępów

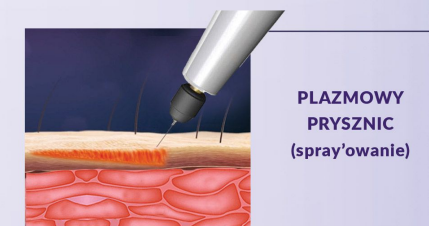

- Kontrolowany i nietermiczny strumień plazmy na większe obszary
- Działanie antybakteryjne - hamowanie trądziku
- Rozjaśnianie i tonowanie koloru skóry - przebarwienia różnego pochodzenia
- Regeneracja kolagenu - blizny, odmładzanie, rozszerzone pory

## WSKAZANIA

włókniaki twarde

włókniaki miękkie

brodawki zwykłe

brodawki płaskie

naczyńniaki

rozstępy

blizny potrądzikowe


brodawki łojotokowe

nadmiar skóry - nawisy powieki górnej

## ZALETY STOSOWANIA

- **BEZPIECZNY**
- **BEZ REAKCJI ALERGICZNYCH**
- **ELIMINACJA SUBSTANCJI SZKODLIWYCH I TOKSYCZNYCH**
- **ŁATWE PROCEDURY**
- **SZYBSZY PROCES GOJENIA NIŻ PO METODACH TERMICZNYCH I STANDARDOWYCH**
- **EMISJA STABILNEJ PLAZMY**

# NÓŻ PLAZMATYCZNY AURUM

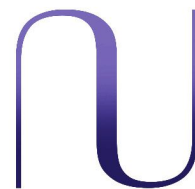

AURUM DG

## SPECYFIKACJE

Zasilanie /Bateria	11 Vdc
Czas ładowania baterii	2 h
Typ baterii	3 komorowa litowa
Wymiary	211 x 46 x 45 mm
Waga	153 g
Warunki przechowywania i transportu	Ciśnienie atmosferyczne: 50 - 106 kPa
Zużycie energii	200 Ma (max)
Warunki otoczenia	Temperatura: 10 - 35 °C Wilgotność: 30 - 75 % Ciśnienie atmosferyczne: 70 - 106 kPa
Klasyfikacja i dyrektywa wg załącznika 93/42/cee, poprawka 2007/47/ce	Klasa II a
Klasyfikacja wg norm bezpieczeństwa	Klasa II typ BF
Częstotliwość wyjściowa	100 kHz

Wyłączny Dystrybutor  
**Aurum Distribution Group**

ul. Iwicka 1 lok. 2  
00-735 Warszawa

tel. (22) 672 66 66  
kom. 798 707 105  
[www.aurumdg.pl](http://www.aurumdg.pl)

AurumDG



Aurum DG Polska

