

TWÓJ WYSZCZUPLAJĄCY DRENAŻ

PRESSOFAST®



TWÓJ WYSZCZUPLAJĄCY DRENAŻ

# PRESSOFAST®



REC. DO SPECJALNEJ REGRACJES



RĘKAWY (58x77cm)



PAS CZĘŚĆ BRZUSZNA (56x37cm)




NOGAWKI (80x92cm)

## Presoterapia

Presoterapia to proces kształtowania sylwetki poprzez drenaż tkanek z wykorzystaniem urządzenia **Pressofast®** wyposażonego w szereg akcesoriów takich jak: nogawki z butami, rękawy na kończyny górne oraz pas na część brzuszną w celu dokładnego drenowania każdej części ciała.

Rękawy i nogawki powietrzne podzielone są na mniejsze sekcje (po 5 każdy element), które wypełniają się stopniowo powietrzem zróżnicowanym pod względem ciśnienia. Dzięki temu można uzyskać


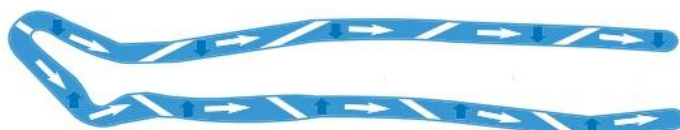


ciągły, postępujący ruch zmieniającego się ciśnienia, co

pozwała odprowadzić limfę w stronę największych węzłów chłonnych i serca. Presoterapia wydatnie stymuluje cyrkulację krwi i limfy, co z powodzeniem wykorzystywane jest przy wyszczuplaniu i kształtowaniu sylwetki, a także walce z cellulite.

## Technologia presoterapii czyli drenaż pneumo-limfatyczny

Dobrodziejstwa terapeutyczne drenażu pneumatycznego doceniane są od wielu lat. Dlatego urządzenie **Pressofast®** w zawrotnym tempie zyskało na popularności i zostało docenione przez wielu specjalistów na całym świecie.

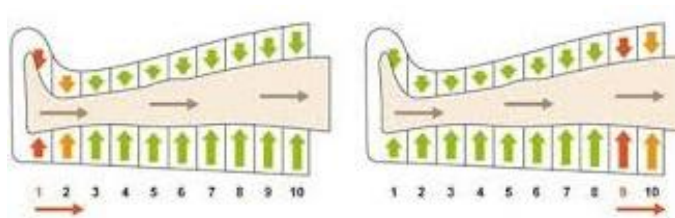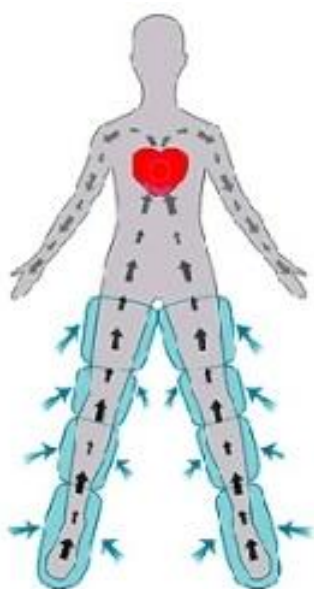

rozpoczynają się od stóp i stopniowo migrują do góry w kierunku brzucha i serca. Mechanizm metody polega na migracji limfy zgodnie z zasadą od wyższego do niższego ciśnienia. W momencie kiedy w początkowej komórce ciśnienie zaczyna się obniżać – wzrasta w następnej aż do samej góry. Kierunek limfy zawsze jest w kierunku serca i węzłów chłonnych, a ciśnienie modyfikuje się w zależności od grubości skóry, tak by nie naruszać drobnych, powierzchniowych naczyń.

**Pressofast®** wytwarza delikatne, mechaniczne presopulsacje, które

## Specyfikacja Pressofast®

WYMIARY/ WAGA	400X310X110 mm / 6,5 kg
ZAKRES CIŚNIENIA	20-200 mB (15-150 mmHg)
ZUŻYCIE ENERGII	44 W
INTENSYWNOŚĆ/CZĘSTOTLIWOŚĆ	220 V / 50 V
POZIOM HAŁASU	49 dB < l < 52 dB
TRYB REGULACJI CIŚNIENIA	AUTOMATYCZNY PODWÓJNY GRADIENT CIŚNIENIA
REGULACJA CZASU	CZAS ZABIEGU/ CZAS UPŁYWAJĄCY
NADMUCHIWANE ELEMENTY	2 RZĘDY PO 5 WEJŚĆ POZWALAJĄCYCH NADMUCHAĆ 1-2 ELEMENTY SYMULTANICZNIE
MATERIAŁ WYKONANIA	ZEWNĘTRZNY: nylon/ WEWNĘTRZNY: poliuretan / ZAMKNIĘCIA: termo-spawane



## Wskazania do **Pressofast®**

---

### Cellulit

Dzięki zmniejszeniu retencji wody oraz usprawnieniu kanałów limfatycznych presoterapią efektywnie zostaje zatrzymany proces tworzenia się pogłębienia cellulitu. **Pressofast®** w połączeniu z lipolizą kawitacyjną **CaviFast2®** oraz z radiofrekwencją RF **CaviFast 2HD®** daje szybkie i długoterminowe rezultaty. Rekomendujemy stosowanie zabiegów z niskokaloryczną dietą.



### Ciężkość nóg

Dzięki intensywnemu drenażowi **Pressofast®** dochodzi do bezpiecznego opróżnienia naczyń limfatycznych z nadmiaru wody oraz likwidacji obrzęków kończyn dolnych, dzięki czemu wcześniej obciążone naczynia stają się mocniejsze i bardziej elastyczne oraz zahamowany jest proces powstawania żylaków. Już po pierwszej sesji pacjent odzyskuje komfort i utraconą lekkość.

### Wyszczuplanie

Regularne drenowanie pomaga efektywnie usuwać zalegającą toksynę w organizmie człowieka, które są przyczyną wielu schorzeń oraz defektów kosmetyczno-wizualnych takich jak: skórka pomarańczowa, efekt pikowanej kołderki czy lokalne akumulacje tłuszczowe. **Pressofast®** pozwala na utrzymanie sprawnie funkcjonującego układu limfatycznego i naczyniowego oraz wspomaga oczyszczanie i detoks organizmu. Dzięki drenażowi pneumo-limfatycznego można dowolnie kształtować sylwetkę i dokonywać korekcyjnych zmian w trudnych do wypracowania innymi metodami miejscach.

